



# MANUAL DE CUIDADOS COM O MEU APARELHO AUDITIVO

Liga Acadêmica de Telessaúde



# COMO CUIDAR DO MEU APARELHO?

## Use o seu aparelho auditivo delicadamente

Evite deixá-lo cair

## Retire o aparelho para tomar banho e para nadar

E evite colocá-lo com os cabelos molhados.

## Use sempre as pilhas certas e novas

Jogue fora as pilhas gastas para evitar que se misturem com as novas



## Limpeza externa

Para limpar a caixa externa do aparelho, utilize um pedaço de pano macio e seco para remover qualquer sujeira

## Ao retirar a pilha, o aparelho será desligado

Quando o aparelho auditivo não estiver em uso, retire a pilha do compartimento e guarde o aparelho no estojo.

## Não o deixe receber qualquer fonte de calor

Ex: secadores de cabelo, porta luvas de carro, microondas, já que o calor extremo estraga o equipamento

## Se atente aos locais

Não deixe seu aparelho auditivo em locais de fácil acesso para crianças pequenas e animais

## Não use sprays e/ou cosméticos quando estiver usando o aparelho

Não molhe o aparelho auditivo e não utilize produtos químicos para sua limpeza (álcool, água sanitária, detergente)

## Mantenha seu aparelho auditivo limpo e seco


Limpar o aparelho auditivo todo dia garante melhor funcionamento e conservação

## Se o aparelho auditivo não estiver funcionando, não tente você mesmo consertá-lo


Procure um profissional especializado ou seu fonoaudiólogo



# HIGENIZAÇÃO DO APARELHO

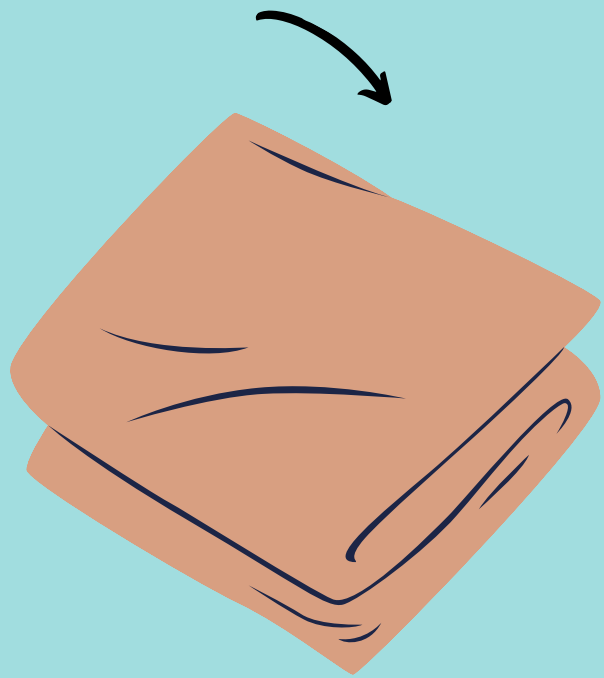

Limpe o aparelho auditivo todos os dias com um pano macio e seco.

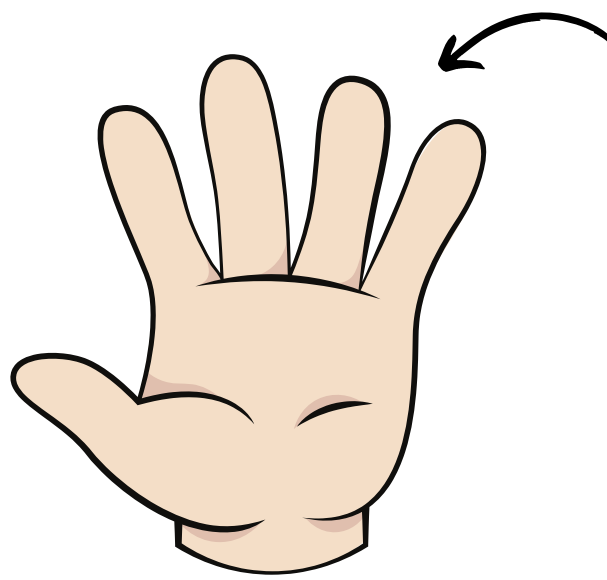


Sempre antes de mexer no aparelho, confirme se suas mãos estão limpas e secas.




As entradas do microfone do aparelho podem ser facilmente bloqueadas, por isso, se o seu aparelho auditivo apresentar algum problema, é importante que veja se as entradas não estão bloqueadas.




Se notar que as entradas do microfone estão tampadas, use uma escova pequena e limpa para limpá-las.

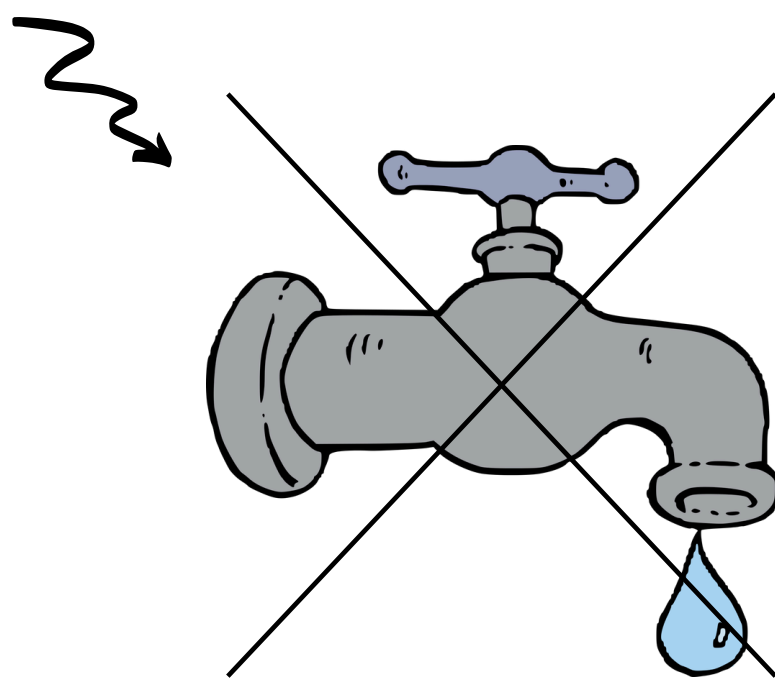

Nunca molhe e/ou lubrifique o aparelho com qualquer substância.

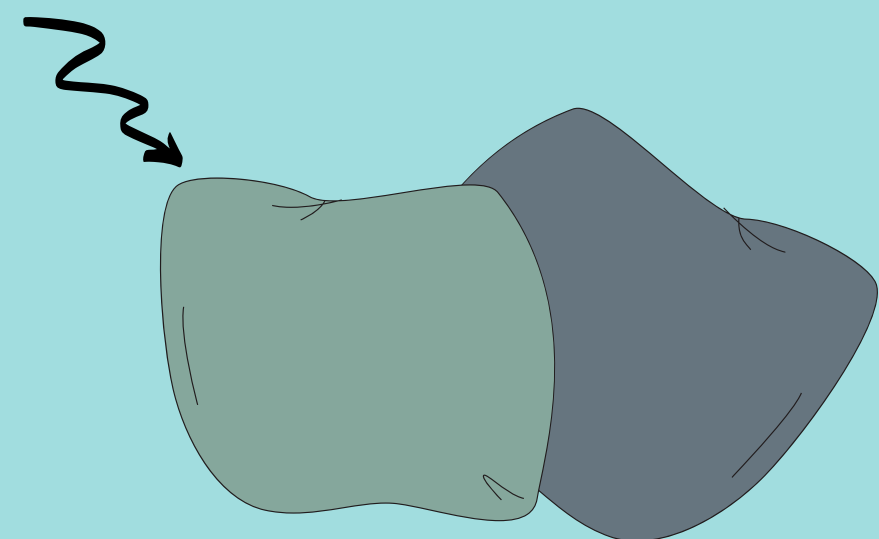

Durante o uso do aparelho, é importante segurá-lo sobre uma superfície macia (travesseiros, toalhas, pano) para que não haja estragos caso ele venha a cair.

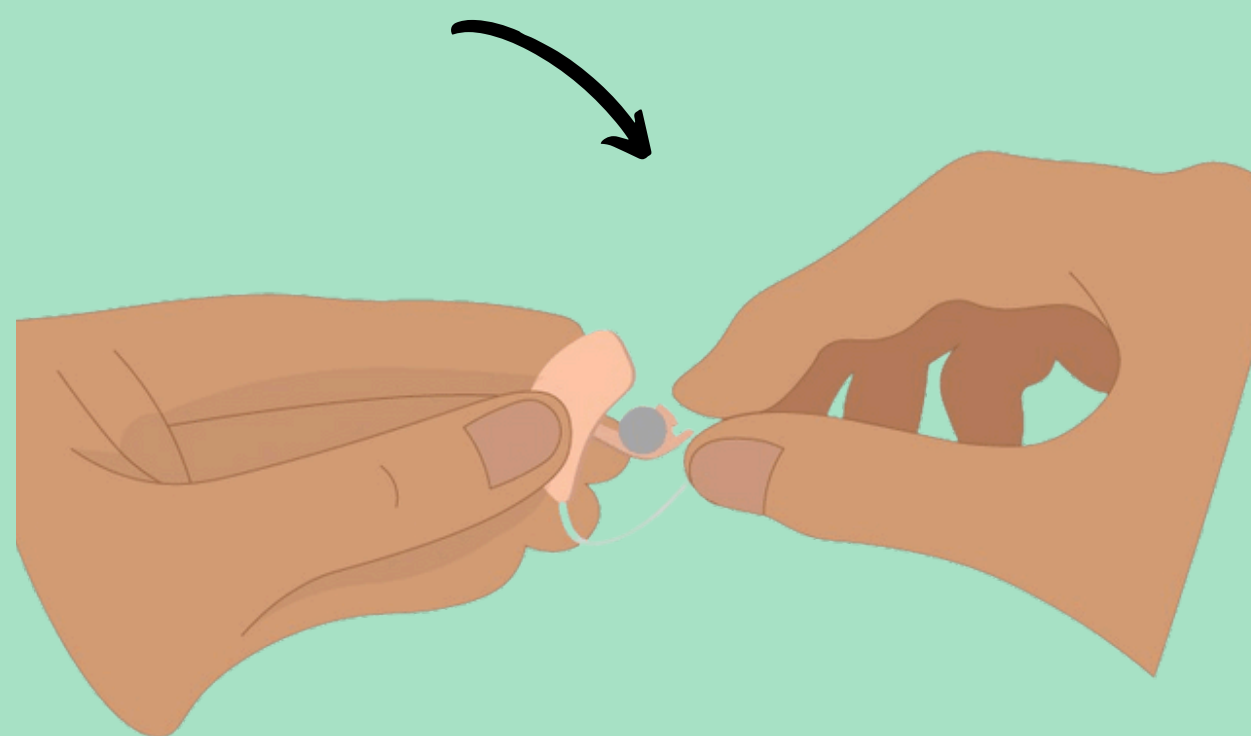

Todos os dias, antes de dormir, retire as pilhas do aparelho e o deixe com compartimento de pilhas aberto durante toda a noite, para que o aparelho possa ventilar.



# HIGENIZAÇÃO DO APARELHO RETROAURÍCULAR - ATRÁS DA ORELHA



1 - Aparelho (parte eletrônica)

2 - Molde (peça de silicone ou acrílico que se liga ao aparelho através do tubo plástico)

## LIMPEZA DIÁRIA

- 1** **Aparelho:** Utilize apenas um pano/papel seco. **NUNCA** passe nada úmido/molhado.
- 2** **Molde:** Limpe o molde (neste caso, podendo ser úmido) e tenha certeza que não há nada tampando o "buraquinho" da ponta. Caso haja cera, retire com papel ou escovinha.

## LIMPEZA MENSAL

Desconecte os moldes da parte eletrônica dos aparelhos. Em seguida, lave ambos os moldes com sabão e a escovinha, depois enxague na água. Deixe secar. Retire a água que ficou no tubinho com uma bombinha de ar. Conecte no aparelho novamente e pronto!

# COMO MANUZEAR MEU APARELHO AUDITIVO

## PASSO 1

Prepare o dispositivo: verifique se a pilha ou bateria do aparelho auditivo está funcionando

## PASSO 2

Verifique as marcações de esquerda/direita.

Os aparelhos auditivos possuem configurações específicas e adaptadas para cada orelha.

**Cor azul:** orelha esquerda  
**Cor vermelha:** orelha direita

## PASSO 3

Segure o aparelho auditivo e coloque a sua ponta no seu canal auditivo.

Coloque o aparelho auditivo atrás da sua orelha.

## PASSO 4

Segure a curva do fio do receptor entre o polegar e o dedo indicador.

Puxe suavemente a orelha para fora e empurre o aparelho auditivo no canal auditivo, torcendo ligeiramente, se necessário. Siga o contorno natural do canal auditivo.

Empurre com cuidado o adaptador/molde no canal auditivo.

## PASSO 5



# PILHAS

## Pilha 675 (selo azul)

1.

É normalmente usada em aparelhos auditivos Retroauriculares de maior potência, e sua duração varia de 15 a 20 dias.

2.

## Pilha 13 (selo laranja)

Pode ser usada em modelos Retro auriculares convencionais e RIC e Intra-articulares sua duração pode variar de 10 a 15 dias dependendo de fatores como tempo de uso e potência do aparelho auditivo.

3.

## Pilha 312 (selo marrom)

Usada nos aparelhos auditivos para Retro auriculares convencionais e RIC e Intra canais. Tem duração média de 7 a 10 dias variando pela potência e conectividade do aparelho.

4.

## Pilha 10 (selo amarelo)

Usada em aparelhos auditivos Micro canais, Retro Auriculares RIC e Micro canais 5 a 7 dias.



# HIGENIZAÇÃO DO APARELHO RETROAURÍCULAR – ATRÁS DA ORELHA



- 1 - Aparelho (parte eletrônica)
- 2 - Tubo Fino
- 3 - Oliva

## LIMPEZA DIÁRIA

- 1 **Aparelho:** Utilize apenas um pano/papel seco. NUNCA passe nada úmido.
- 2 **Tubo fino:** Tubo de plástico que conecta o aparelho á sonda. Deve ser limpo com um pano/papel podendo ser úmido.
- 3 **Oliva:** Deve ser limpa com um pano/papel, podendo ser úmido. Sempre checar se há obstrução do orifício da ponta. Caso haja, limpe com um papel ou escovinha.

## LIMPEZA MENSAL

Higienize SOMENTE as olivas com água e sabão neutro!



**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO DO**

**MANUAL DE  
CUIDADOS COM O  
MEU APARELHO  
AUDITIVO  
2022**

**Organizadoras:**

Carla Danzi Galan, Débora Cristina Cezarino, Giovana Gomes, Giovana Aparecida Scherite Maschio, Mariana Pereira Cardoso, Mayara Bissoli Oliveira, Pâmella de Oliveira Ladeia, Thainá dos Santos Coutinho, Vívian Aparecida Vespero e Zaíne Alícia Soto da Silva e Profa. Dra. Wanderléia Quinhoneiro Blasca.

**Referências:**

MOREIRA, Paula. Como cuidar do aparelho auditivo. Surdos que ouvem, 2021. Disponível em:

<https://cronicasdaturdez.com/como-cuidar-aparelho-auditivo/>. Acesso em: 17/11/2021.

Uso e cuidados dos aparelhos auditivos. Instituto auditivo, 2020. Disponível em: <https://www.institutoauditivo.com.br/uso-e-cuidados-dos-aparelhos-auditivos/>. Acesso em: 17/11/2021.

Cuidados com o aparelho auditivo. Grupo Microsom, 2018. Disponível em: <https://www.microsom.com.br/cuidados-com-o-aparelho-auditivo/>. Acesso em: 17/11/2021.

Tudo o que você precisa saber sobre baterias (pilhas) para aparelhos auditivos. AKOUSIS, 2020. Disponível em: <http://akousis.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-bateriais-pilhas-para-aparelhos-auditivos/>. Acesso em: 17/11/2021